

Hyperosmolär oftalmisk lösning utan konserveringsmedel

INNEHÅLL:
Natriumklorid 5 %, Natriumhyaluronat 0,15 %
Övriga innehållsämnen: Renat vatten,
trinitratdihydrat, citronsyramonohydrat,
hydroxipropylmetylcellulosa. ODM 5* innehåller
natriumhyaluronat, ett ämne som förekommer
naturligt i ögat och som, genom sina smörjande
egenskaper, bidrar till att skydda hornhinnan.

NÄR SKA DU ANVÄNDA ODM 5*?
ODM 5* rekommenderas för att minska hornhinneödem: ödem orsakat av hornhinne dystrofier, posttraumatiskt ödem eller ödem efter operation. Hornhinneödem kännetecknas av ett överskott av vätska i hornhinnan. ODM 5*, en hyperton lösning, drar ut denna överskotts vätska ur hornhinnan genom osmotisk effekt, vilket gör att den tillfälligt kan återfå ett normalt tillstånd av hydrering. ODM 5* bidrar på så sätt till att förbättra din syn.

- Tvätta händerna noggrant före användning.
- Droppa 1-2 droppar 4 gånger per enligt läkarens anvisningar. Droppa lösningen i ögats konjunktivålsäck, samtidigt som du tittar uppåt och drar undre ögonlocket lätt nedåt.
- Efter att ha droppat, håll ögat stängt i 1-2 minuter.
- Undvik att flaskans spets kommer i kontakt med ögat eller ögonlocket.
- ANVÄNDS I ÖGAT




- Får inte sväljas.
- Använd inte om flaskan är skadad (risk för kontaminering).
- Använd inte efter utgångsdatumet som står på flaskan.
- Används inom 3 månader efter öppnandet (risk för kontaminering och att produkten blir mindre verksam).
- Förvaras i rumstemperatur (mellan +2 och 25 °C).
- Används inom några efter varje användning, kontrollera att det inte finns kvar någon droppa på spetsen (risk för kontaminering).
- Undvik att vidröra flaskans spets med händer, öga och ögonlock (risk för mikrobiell kontaminering).
- Används inom 15 minuter mellan användningarna med fingrarna eller en ice-steril sticka (risk för mikrobiell kontaminering).
- Om din läkare har ordinerat även andra ögondroppar, använd dem 15 minuter mellan användningarna.
- Förvaras utom syn- och räckhåll för små barn.

- Överkänslighet mot något av innehållsämnen.
- Användning av kontaktlinser (ODM 5* är inte kompatibel med kontaktlinser)

BIVERKNINGAR:

- I vissa fall kan det uppstå tillfälliga problem vid användningen, som en lätt brännande eller stickande känsla eller en tillfällig påverkan på synen.
- Om biverkningen kvarstår eller inte finns med på denna bipacksedel, sluta använda produkten och kontakta din läkare.

Medicinteknisk produkt som uppfyller kraven i direktiv 93/42/EEG med ändringar.
Datum för märkning: oktober 2013.
Datum för senaste uppdateringen av bipacksedeln: oktober 2023.
Patentansökan är pågående.
EAN: 3664490000949

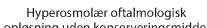

Hyperosmolær oftalmologisk opløsning uden konserveringsmidde

PRÆSENTATION: Multidosis hætteglas med 10 ml uden konserveringsmiddel.

SAMMENSETNING:
Natriumchlorid 5 %, natriumhyaluronat 0,15 %
Andre indholdsstoffer: Renset vand, dehydreret
trinatriumcitrat, citronsyremonohydrat,
hydroxypropylmethylcellulose. ODM 5[®] indeholder
natriumhyaluronat, en naturligt forekommende
forbindelse i øjet, som med dens smørende
egenskaber bidrager til at beskytte hornhinden.

HYDRAN SKAL ODM 5^{te} BRØDES:
ODM 5^{te} anbefales til at mindske væskeansamlingen i hornhinden: væskeansamlinger forårsages af hornhindeedstrofer, posttraumatiske væskeansamlinger, væskeansamlinger efter operationer. Væskeansamlinger i hornhinden karakteriseres ved overskydende væske i hornhinden. ODM 5^{te}, en opløsning med højt saltindhold, trækker ved osmotisk effekt disse overskydende væsker ud af hornhinden, hvilket gør det muligt mildt og sikkert at genskabe en normal hydrering i hornhinden. ODM 5^{te} er således med til at forbedre din synskvalitet.

- Vask hænderne grundigt før drypningen foretages.
- Dryp 1 til 2 dråber 4 gange pr. dag, som anbefalet af din læge. Dryp dråberne i konjunktivalsækken nederst i øjet ved at kigge opad og trække det nederste øjenlåg lidt nedad.
- Efter drypning skal du holde øjet lukket i 1 til 2 minutter.

• TIL OKULÆR BRUG.




- Slug ikke.
- Brug ikke, hvis flasken er beskadiget (risiko for kontaminering).
- Hvis flasken er udløbet, den står på flasken.
- Skal bruges inden for 3 måneder efter åbning (risiko for kontaminering og tab af produktets effektivitet).
- Opbevares ved stuetemperatur (mellem +2 og +25°C).
- Luk flasken omhyggeligt efter hver brug samtidig med, at du sikrer, at der ikke er en tilbageværende dråbe på spidsen (risiko for kontaminering).
- Hvis du tækt mellem spidsen af flasken og hænderne, øj eller øjenlægne (risiko for mikrobiel kontaminering).
- Undgå at røre eller tørpe spidsen af med fingrene eller med ikke-sterilt stof (risiko for mikrobiel kontaminering).
- Hvis du har en ordineret øjendråbe, skal du vente mindst 15 minutter mellem hver drypning.
- Opbevares undt for små børn rækkevidde.

- Overfølsomhed over for et af indholdsstofferne.
- Hvis du bruger kontaktlinser (ODM 5[®] er ikke egnet til brug med kontaktlinser).

- I visse tilfælde kan forbigående forstyrrelser f.eks. en lettere brændende fornemmelse eller prikken samt midlertidige synsforstyrrelser forekomme under drypningen.
- I tilfælde af vedvarende uønskede bivirkninger eller bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, skal du stoppe med at tage præparatet og kontakte din læge.

Medicinsk udstyr i overensstemmelse med direktiv
93/42/EØF med ændringer.
Dato for anbringelse af mærkning: oktober 2013.
Dato for seneste revision af indlægssedlen: Oktober
2023.
Patent indgivet.
EAN: 3664490000949

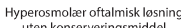


FORM: Multidoseflaske på 10 ml uten konserveringsmiddel.

SAMMENSETNING:
Natriumklorid 5 %, natriumhyaluronat 0,15 %. Andre ingredienser: Renset vann, trisnatriumsitratdihydrat, sitronsyremonohydrat, hydroksypropylmetylcellulose. ODM 5^e inneholder natriumhyaluronat, et stoff som på naturlig måte finnes i øyet, og som bidrar til å beskytte hornhinnen, takket være sine smørende egenskaper.

NAR BRØKER MAN ØDM 5°?
ØDM 5° bruges for at reducere hornhinneødem:
ødem som er forårsaket av hornhinneedstroffer,
posttraumatisk ødem, postkirurgisk ødem.
Hornhinneødem oppstår når det er for mye væske
i hornhinnen. ØDM 5°, som er en ekstra sterk
saltpopløsning, trekker denne overskytende væsken
ut av hornhinnen ved hjelp av et osmotisk trykk, slik at
fuktinnværet i hornhinnen intill videre blir normalt igjen.
ØDM 5° bidrar dermed til å forbedre synet.

- Vask hendene grundig før du drypper middelet i øyet.
- Bruk 1 til 2 dråper i øyet 4 ganger daglig. Følg legens anvisning. Drypp dråpene i øyets nedre konjunktivalsekk; se opp, samtidig som du trekker det nedre øyelokket litt ned.
- Hold øyet lukket i 1 til 2 minutter etter instillasjon.
- Unngå at flaskettuten kommer i kontakt med øyet eller øyelokkene.
- Til: BRUK LØYNF

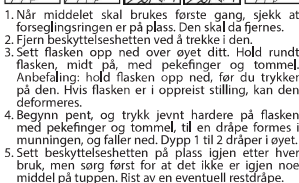

- Skal ikke brukes hvis flasken er skadet (fare for kontaminering).
- Skal ikke brukes etter utløpsdatoen som står på flasken.

- Brukes innen 3 måneder etter åpning (fare for kontaminering og forringet produkttytelse).
- Oppbevares i romtemperatur (mellom +2 og 25 °C).
- Lukk flasken godt etter hver bruk, og sjekk først at det ikke sitter igjen dråper på tuppen av flasken (fare for kontaminering).
- Hvis flasketoppen kommer i berøring med hendene, øyne eller øyelokk (fare for mikrobiell kontaminering).
- Unngå å berøre eller tørke av tuppen med fingrene eller en klut som ikke er steril (fare for mikrobiell kontaminering).
- Hvis legen din også har foreskrevet en annen type øyedråper, må du respektere et intervall på minst 15 minutter mellom de to innleggene.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.


KONTRAINDIKASJONER:

- Hypersensibilitet overfor en av komponentene.
- Brukere av kontaktlinser (ODM 5° er ikke kompatibel med kontaktlinser).

- I noen tilfeller kan det oppstå forbigående problemer, som f.eks. en svakt brennende eller prikkende følelse, og tåkesyn like etter dryppingen.
- Hvis du får vedvarende bivirkninger eller plager som ikke er beskrevet i dette pakningsvedlegget, må du slutte å bruke produktet og oppsøke legen.

Medisinsk utstyr som oppfyller kravene i direktivet 93/42/EØF, med endringer.
 Dato for merkingens påføring: oktober 2013.
 Dato for siste revisjon av pakningsvedlegget: Oktober 2023.
 Patentsøknad innlevert.
 EAN: 366490000949

CE0459

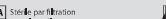

A conserver entre +2 et +25°C

Conservar entre + 2 y 25 °C
Säilytetään +2 ja +25 °C välillä



HORUS PHARMA
22, allée Camille MUFFAT,
Inedi 5, 06200 Nice France

Distribuidor en España: Horus Pharma Ibérica S.L.U. Gran Vía Carlos III 98, 6º 08028 - Barcelona - España

C/ODM087-09/23

 SERVICE PACKAGING	PAYS : FR - ES - FI - SE - DK - NO CODE PRODUIT FINI : CODE ARTICLE : C/ODM087-09/23 ARTICLE : NOTICE	NOM DU SOUS-TRAITANT : PHARMASTER CODE SOUS-TRAITANT :	COULEURS UTILISÉES NOIR 
NOM DU PRODUIT : ODM5	LOGICIEL UTILISÉ : ILLUSTRATOR CC FONTS : Din Pro Regular CORPS DE TEXTE (mini) : 8 PTS	CODE FAMILLE : à venir FORMAT OUVERT : 150 x 480 mm FORMAT FERMÉ : 150 x 24 mm GRAMMAGE : 40 GRAMMES	
COMMENTAIRE(S) : Creation for Nordics Countries			
TYPE : ME			
 ESSAI	 MOCK UP	 LANCEMENT	 PRODUCTION
FICHIER, FAIT PAR : VERSION LE : v1 -	FICHIER, FAIT PAR : VERSION LE : v1 -	FICHIER, FAIT PAR : CORRIGÉ PAR : RF	FICHIER, FAIT PAR : VALIDATION PAR : LE : VERSION LE :